


# Rentrer à la maison avec un pot Redon

## Information pour les patients

Le pot Redon est le récipient en plastique qui recueille le liquide et le sang de votre drain de plaie. Lorsque le pot est à moitié plein, vous devez le remplacer par un **nouveau**. Vous ne devez jamais vider et réutiliser le pot.


### INSTRUCTIONS

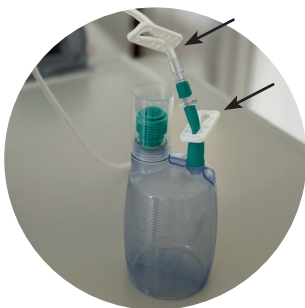

1. Glissez les **deux** pinces. Cela ferme la conduite.




2. Déconnectez le pot Redon en dévissant le raccord entre les deux pinces.
3. Ouvrez l'emballage du nouveau pot Redon et gardez le raccord stérile.
4. Connectez le nouveau pot Redon.
5. Glissez à nouveau les deux pinces pour les ouvrir.
6. Vérifiez le drainage.

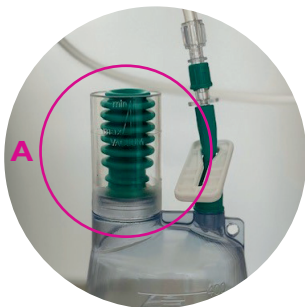

7. Vérifiez la force d'aspiration :

**A.** Si l'harmonica comme dans le pot A est complètement levé, il n'y a pas de force d'aspiration.  
Dans ce cas, vous ne pouvez plus utiliser le pot. N'essayez jamais de pousser l'harmonica vers le bas vous-même – cela ne créera pas de nouveau vide.

**B.** Si l'harmonica comme dans le pot B est comprimé, alors il y a une force d'aspiration.  
C'est la position correcte.

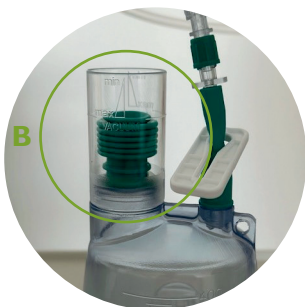

Vérifiez la force d'aspiration régulièrement.

8. Fermez l'ancien pot Redon en glissant la pince pour le fermer.  
Jetez le pot à la poubelle.

## DÉBIT REDON

Prenez toujours ce formulaire avec vous lors de la consultation.

Date de l'intervention : .....

Personnel infirmier à domicile nom : ..... tél : .....

Nom du patient

Date	État de la plaie		Drain 1 :		Drain 2 :		Drain 3 :		Questions, remarques ? Besoin de pansements ?	
			ml / 24 h éliminés	Pot remplacé	ml / 24 h éliminés	Pot remplacé	ml / 24 h éliminés	Pot remplacé		