

Naar huis met een redonpot

Informatie voor patiënten

De redonpot is de plastic recipiënt die het wondvocht en bloed van uw wonddrain opvangt. Wanneer de pot halfvol is, moet u die vervangen door een **nieuwe**. U mag de pot nooit leegmaken en hergebruiken.


INSTRUCTIES



1. Schuif de **twee** klemmetjes toe. Zo sluit je de leiding af.




2. Ontkoppel de redonpot door het verbindingsstuk tussen de twee klemmen los te draaien.
3. Open de verpakking van de nieuwe redonpot en houd het verbindingsstuk steriel.
4. Koppel de nieuwe redonpot aan.
5. Schuif de twee klemmen opnieuw 'open'.
6. Controleer de afloop.

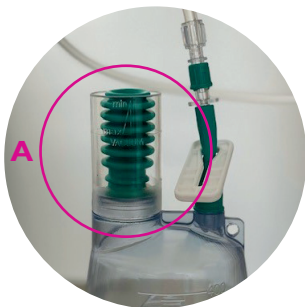

7. Controleer de zuigkracht:

A. Als de harmonica zoals bij pot A volledig omhoog staat, dan is er geen zuigkracht. In dat geval kunt u de pot niet langer gebruiken. Probeer nooit zelf de harmonica naar beneden te duwen - zo krijgt u geen nieuw vacuüm.

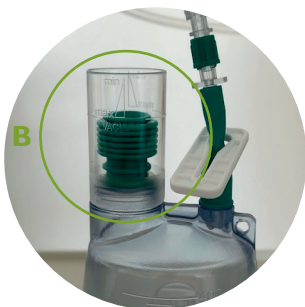

B. Als de harmonica zoals bij pot B is samengedrukt, dan is er wel zuigkracht. Dat is de juiste stand.

Controleer de zuigkracht op regelmatige tijdstippen.

8. Sluit de oude redonpot af door het klemmetje dicht te schuiven. Gooi de pot weg bij het huisvuil.

DEBIET REDON

Breng dit formulier altijd mee naar de raadpleging.

Datum ingreep:

Thuisverpleegkundige naam: tel.:

Naam patient

Datum	Status wonde	Drain 1:		Drain 2:		Drain 3:		Vragen, opmerkingen? Verbandmateriaal nodig?
		ml / 24 uur bijgekomen	Potje vervangen	ml / 24 uur bijgekomen	Potje vervangen	ml / 24 uur bijgekomen	Potje vervangen	