



Onderhoud van een getunnelde katheter

(Deze brochure is niet van toepassing op dialysekatheters.)


informatie voor patiënten

Spoel wekelijks elk lumen met fysiologische zoutoplossing (NaCl 0,9%) tijdens een periode van buitengebruikstelling.

WEKELIJKS SPOELEN

VERVANGING VAN DE AFSLUITDOPJES

Werkwijze (info voor thuiszorg):

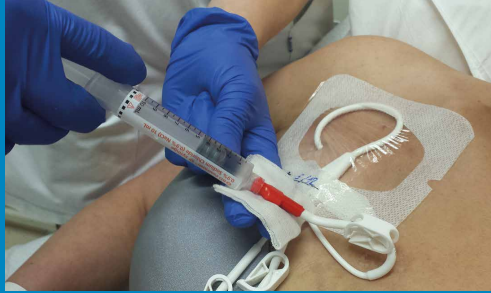


- Ontsmet uw propere handen met handalcohol.
- Doe zo nodig kiemarme handschoenen aan.
- Controleer of de klem van de katheter gesloten is.
- Hou een steriel kompres gedrenkt in een alcoholische oplossing onder de connectieplaats.
- Verwijder het oude afsluitdopje.
- Ontsmet het open uiteinde als het zichtbaar vuil is.
 - X Bij naaldloze afsluitdopjes: plaats eerst een nieuw naaldloos afsluitdopje.
 - X Bij conventionele afsluitdopjes: plaats een nieuw afsluitdopje na het spoelen.
- Plaats de spuit met 10 ml* NaCl 0,9% op het katheteruiteinde of op het nieuwe naaldloze afsluitdopje.
- Open de klem, aspireer niet.
- Spuit de NaCl 0,9% pulserend in. Gebruik bij weerstand geen extra druk: de katheter kan dan worden beschadigd.
- Sluit af onder positieve druk: sluit de klem (op het verdikte katheterdeel 'clamp here') terwijl de laatste 3 ml traag wordt ingespoten.
- Spoel de andere lumens op dezelfde manier.

* 5 ml voor een zuigeling of kind dat minder weegt dan 10 kg

WEKELIJKSE VERBANDZORG ONTSMETTING MET VERBANDWISSEL

Werkwijze (info voor thuiszorg):

- Ontsmet uw propere handen met handalcohol.
- Verwijder het verband.
- Ontsmet opnieuw uw handen met handalcohol (wegens contact met bevuild materiaal).
- Doe zo nodig kiemarme handschoenen aan.
- Ontsmet (15 seconden contacttijd!) al wrijvend de insteekplaats rond de katheter met chloorhexidine 2% in alcohol en daarna de bredere omgeving rond de insteekplaats. Laat drogen aan de lucht.
- Ontsmet het gedeelte van de katheter dat onder het verband zit en laat drogen.
- Maak een krul, moduleer het verband mooi rond de katheter (krul vanaf 8 weken na plaatsing).
- Breng een transparant steriel verband aan. Werk af met een vlinderverband.

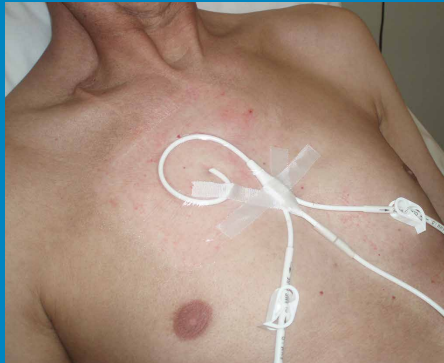

AANDACHTSPUNTEN

VOOR ZORGVERLENERS EN PATIËNTEN IN DE THUISZORG

- X Vervang het verband minimaal wekelijks of frequenter als het verband vochtig, los of zichtbaar bevuild is.
- X Gebruik geen extra druk, als er weerstand wordt ondervonden bij het inspuiten. Daardoor geraakt de katheter beschadigd en kan ze zelfs scheuren. Verwittig het katheterteam als dit gebeurt. Bescherm de scheur met steriele kompressen gedrenkt in een alcoholische oplossing en klem de katheter tussen de beschadiging en de insteekplaats af om bloedlekkage, luchtembolen en infectie te voorkomen.
- X Gebruik geen ether of aceton voor het verwijderen van kleefresten.
- X De klem mag uitsluitend op het stuk 'clamp here' gesloten worden. Plaats de klem niet steeds op exact dezelfde plaats.
- X Hou bij het ontkoppelen altijd een steriel kompres gedrenkt in een alcoholische oplossing onder de connectieplaats.
- X Voorzie indien noodzakelijk het volgende, specifieke materiaal vanuit de ziekenhuisapotheek:

- ✓ klevend fixatiesysteem:
 - Statlock® (eerste 8 weken na plaatsing)
- ✓ ontsmettend verband:
 - Tegaderm CHG® of Biopatch®

CONTACTGEGEVENS

Bij een katheterprobleem (probleem met infusie en/of bloedafname, infectie, beschadigde katheter ...) of voor bijkomende inlichtingen kunt u tijdens de kantooruren (8.30 - 16 uur) contact opnemen met:

- verpleegkundigen referentieteam intraveneuze katheterzorg, tel. 016 34 08 64, intraveneuze_katheterzorg@uzleuven.be
- secretariaat, tel. 016 34 68 32, 016 34 68 31 of 016 34 68 29

© mei 2019 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door de verpleegkundigen en artsen van het referentieteam intraveneuze katheterzorg in samenwerking met de dienst ziekenhuishygiëne en de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700121.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 mynexuzhealth



Raadpleeg uw medisch dossier
via www.mynexuzhealth.be
of download de app

